




Centro Ortopédico do Sul

Catálogo de produtos
Burmeier

VIVER SEGURO, EM CASA

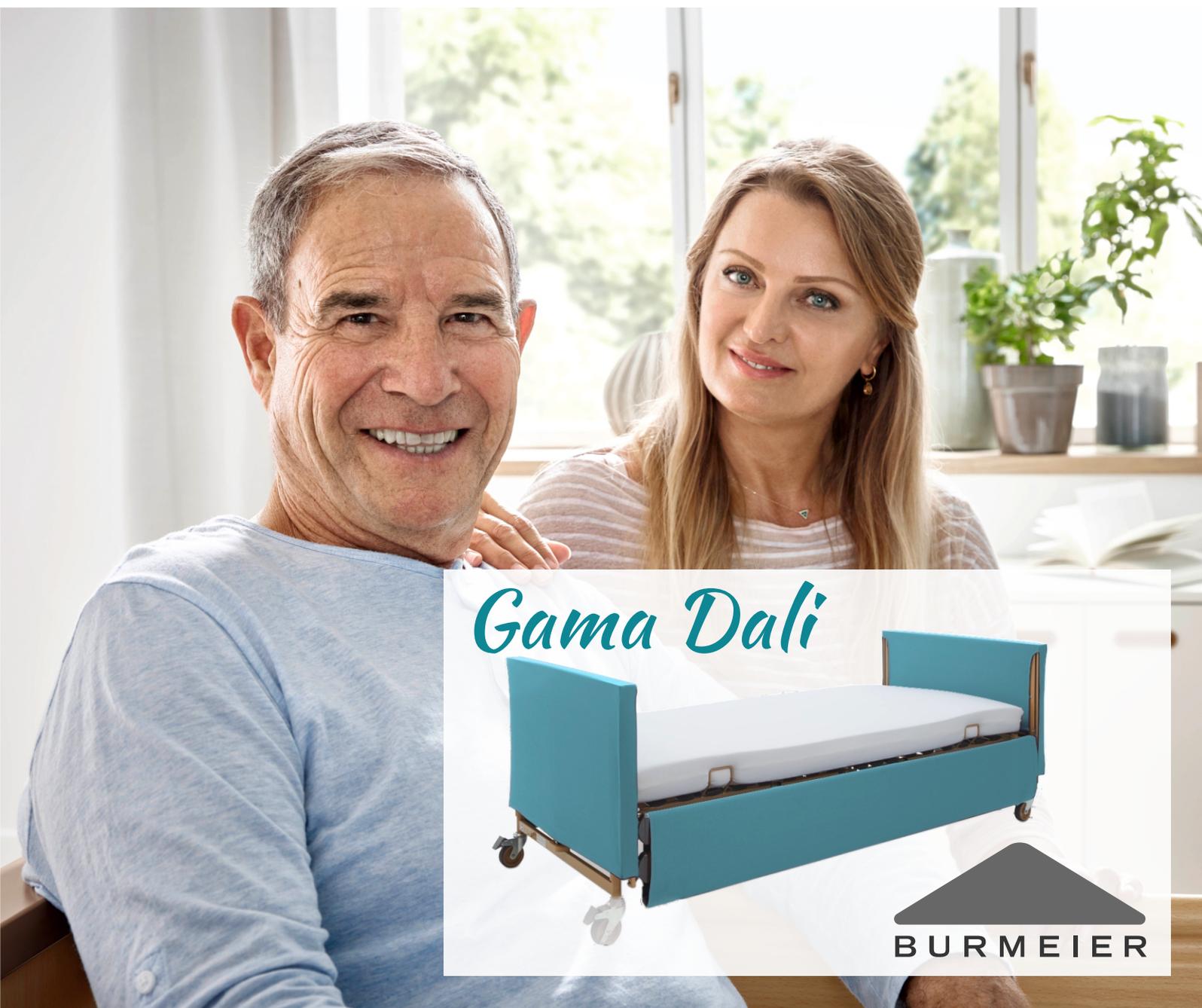

Gama Dali



BURMEIER

mai/2024

Condições Gerais de Venda

1. Encomendas

As encomendas deverão ser efetuadas por fax, email ou ao Consultor Comercial até às 14h de cada dia útil, garantindo assim expedição no próprio dia. Caso efetue a encomenda após as 15h, esta será aceite, porém, a expedição apenas ocorrerá no dia útil seguinte à encomenda.

Deverá sempre ser mencionada a quantidade unitária ou número de embalagens e deverá ainda mencionar sempre a data da encomenda, bem como o nome legível da pessoa responsável da mesma. Sempre que na encomenda o número da quantidade solicitada for inferior ao número da quantidade por embalagem, a encomenda será dada como válida para embalagens completas, sendo arredondadas para mais.

As encomendas são imediatamente processadas e preparadas, pelo que qualquer acréscimo será considerado uma nova encomenda e, nessa medida, sujeita a todas as demais condições.

Caso apresente saldo vencido à data da encomenda, esta será registada, porém não será processada nem será alvo de faturação e expedição até regularização dos saldos vencidos. Poderá efetuar um pedido de conta corrente por telefone, fax ou email através dos canais disponíveis.

Envie as suas encomendas para:

Email: clientes@centroortopedicosul.com

Fax: 289 702 435

Consulte o seu Consultor Comercial

2. Receção da encomenda

Na receção na mercadoria, se for detetada alguma anomalia, como sejam caixas abertas ou danificadas, deverá isso ser mencionado nas observações da guia da transportadora: «Sujeito a conferência». Após conferência, se detetar material danificado no seu interior, dever-nos-á reportar os danos por escrito no prazo máximo de 24 horas (email, fax ou carta), se possível com imagens explícitas dos danos para que tomemos as devidas providências relativamente à troca ou crédito do material.

3. Devoluções

Só serão aceites devoluções num prazo até 8 dias seguidos da data da fatura.

Só poderão ser aceites devoluções com o prévio acordo da nossa firma, sem o qual serão recusadas e reenviadas.

Todas as mercadorias devolvidas por motivos da responsabilidade do cliente estarão sujeitas a uma taxa de manuseamento de 20% do valor da fatura e devem ser expedidas com portes pagos pelo cliente.

Será efetuada uma nota de crédito apenas e só depois do material se encontrar nas nossas instalações para verificação das quantidades devolvidas e o estado da mercadoria e embalagem.

As devoluções originadas pela nossa responsabilidade serão creditadas por inteiro, não estando sujeitas a portes ou taxas de manuseamento. Nas situações em que a responsabilidade da devolução seja imputável ao cliente, ser-lhe-ão cobradas taxas de manuseamento, portes de envio e portes de recolha, conforme valor designado no ponto 5.

Só serão, em qualquer um dos casos, validadas encomendas que se encontrem em perfeito estado e na sua embalagem original. Todas as notas de crédito enviadas aos clientes deverão, ao abrigo do n.º 5 do artigo 71.º do CIVA, ser enviadas por correio ou email com o duplicado devidamente carimbado e assinado pela pessoa responsável.

4. Cancelamento

As encomendas efetuadas pelos clientes não poderão ser canceladas, salvo quando existir o nosso acordo por escrito. Se este acordo não existir o cliente terá de pagar 10% do valor da encomenda (caso a encomenda não esteja faturada) ou 20% do valor da encomenda (caso esta já tenha sido tratada e faturada) a fim de indemnizar a nossa empresa de todas as despesas e perdas.

5. Transporte

Será efetuado pela nossa empresa ou por transportadora nas vossas instalações, todos os dias úteis. Envie-nos o seu e-mail e receberá um email assim que a sua encomenda sair do nosso armazém.

Em encomendas superiores a 150,00Eur (sem IVA) não serão debitados portes ao cliente, sempre que se verificarem encomendas inferiores a 150,00Eur (sem IVA) serão debitados portes, no valor de 7,50Eur (sem IVA), sem qualquer aviso prévio.

Reservamo-nos ao direito de efetuar entregas parciais de mercadorias.

Não nos responsabilizamos por quaisquer atrasos provocados, total ou parcialmente, por desastres naturais, condições climáticas adversas, incêndios, inundações ou outras causas de força maior, greves ou outros litígios de ordem laboral, sabotagem, explosão, guerras, embargos, dificuldades de transporte, escassez imprevista ou indisponibilidade de combustíveis, cortes de fornecimento de energia, indisponibilidade de transportes, de matérias-primas ou de existências em armazém, impossibilidade ou atraso na obtenção de autorizações governamentais, aprovações, licenças, bem como qualquer outra causa alheia à nossa vontade e controle.

6. Condições de pagamento

Os pagamentos poderão ser efetuados por transferência bancária ou cheque (enviado por correio).

Os cheques deverão ser passados à ordem de Centro Ortopédico do Sul Lda

Os dados para transferência bancária são: Banco: Millennium BCP

Titular: Centro Ortopédico do Sul Lda

Balcão: Faro

IBAN: PT50 0033 0000 00046573005 84

Referências Multibanco (Caixas ATM ou Netbanco):

Entidade: 11989

Referência: 209 xxx xxx

Valor: EUR xxx,xx

Sempre que efetuar transferência bancária deverá enviar o comprovativo da mesma indicando os documentos a liquidar, para financeiro@centroortopedicosul.com ou fax 289 702 435. Caso não nos seja remetido qualquer documento que comprove liquidação dos saldos vencidos, reservamo-nos ao direito de bloquear a expedição das encomendas pendentes durante tanto tempo quanto a demora na liquidação dos valores vencidos.

Os pagamentos das faturas devem respeitar as datas de vencimento correspondentes, caso contrário futuras encomendas serão bloqueadas informaticamente por falta de pagamento.

7. Alterações

Reservamo-nos o direito de, sem aviso prévio, proceder a alterações dos preços, portes ou qualquer outro valor.

Qualquer dissimelhança verificada entre o produto, fotografia e ou catálogo não determina a perda ou diminuição de qualidade do artigo e esta por si só não poderá ser motivo para devolução.

Dali standard



- Intervalo de regulação em altura:
40 – 80 cm
- Económico, confortável e seguro:
 - Guardas laterais de segurança montadas em segundos graças ao Sistema Easy Click
 - Comando bluetooth sem fios
 - Bloqueio/Desbloqueio digital através de app para smartphone

Dali low-econ



- Intervalo de ajuste em altura:
32 – 72 cm
- Cama baixa e resistente:
 - Previne lesões de quedas e permite que o cuidador opere o utente a uma altura ideal
 - Sistema de elevação fiável de 230 volts
 - Excelente relação qualidade/preço

Dali econ



- Intervalo de regulação em altura:
40 – 80 cm
- Económico, confortável e seguro:
 - Guardas laterais de segurança montadas em segundos graças ao Sistema Easy Click
 - Comando com fios

Catálogo de produtos



Camas Burmeier - Gama Dali

O cuidado em casa é a base do cuidado em geral na nossa sociedade. Para o efeito, é crucial que haja um desenvolvimento técnico de equipamentos de assistência adequados.

A facilidade operacional e a conectividade que vem com os sistemas de assistência digital podem aliviar o stress causado pelo reduzido número de cuidadores e pelo isolamento social que é a realidade diária de muitas pessoas idosas.

A nossa série Dali é a mais vendida na Alemanha e na Europa em geral há vários anos. Estamos a caminhar para o futuro. Com o controlo digital, através de apps e o nosso sistema de funcionamento Easy Click, os nossos modelos Dali aliviam o trabalho dos cuidadores e enfermeiros que trabalham em lares, residências e casas de repouso.

Utentes e cuidadores passam a desfrutar de maior comodidade e podem viver num ambiente doméstico confiável em que se sintam mais seguros em geral, com as camas Dali da Burmeier.

Ortopedias e lojas especializadas beneficiam com a simplicidade de montagem rápida e facilitada.

O nome Dali é, e continua a ser, sinónimo de camas em que os clientes podem confiar.

Consulte o nosso catálogo e utilize a referência certa para garantir a correta encomenda e célere entrega. Ajude-nos a ajudar.



Índice

Variantes de Modelos

Dali Standard 4-5

Dali low-econ 6-7

Dali econ 8-9

Sistema de Elevação 230 volts 10

Sistemas de elevação 24 volts 11

Sistema Easy Click 12-13

Comando sem fios (Bluetooth) 14-15

O app Dali-Lock 16

Capas em tecido 17

Acessórios e fichas Técnicas 18-19

Colchões Anti Escaras 20

Gama Dali
«...um sono
tranquilo e
qualidade de vida»





Dali Standard

Versão Armínia

Rápida e digital



A Dali é a cama de cuidados mais vendida da Alemanha, graças à sua inovadora tecnologia e longevidade. É uma cama robusta e de baixa manutenção fabricada com materiais de alta qualidade.

O estrado de 4 secções pode ser operado convenientemente por um comando wireless que é conectado à cama através de bluetooth. Graças ao recurso Trendelenburg invertido (incluído de série), a cama pode ser ajustada para uma posição sentada ideal para comer ou ver televisão. Se o cuidador quiser bloquear certas posições ao utente, pode ser feito usando o comando e chave magnética (incluída) ou, ainda mais convenientemente, usando a app Dali-Lock (gratuita num smartphone).

As guardas laterais deslizam facilmente na calha pré-montada através de suportes com o sistema Easy Click. Isto ajuda a montar a cama de forma significativamente mais rápida e simples.

O ajuste do apoio de pernas está disponível de série com cremalheira.

Grandes vantagens

- Carga de trabalho segura até 185 kg
- Travão de pé, suave, que pode ser operado com chinelos ou também de meias
- Comando bluetooth tem um grande ciclo de vida e pouca necessidade de manutenção para todos os operadores da cama
- Montagem fácil e rápida através do sistema Easy Click
- Pendural incluído de série
- Cremalheira incluída de série




- ▶ O comando sem fios, permite controlar a cama sem esforço tanto pelo utente quanto pelo cuidador.
- ▼ Os travões podem ser operados facilmente com meias ou pantufas.

- ▲ A posição sentado, torna-se confortável e facilita a respiração, reduzindo o risco de aspiração pulmonar durante as refeições.
- ▼ As guardas laterais de segurança podem ser colocadas ou removidas sem ferramentas com o sistema Easy Click.



Dimensões exteriores/Intervalo de ajuste em altura:

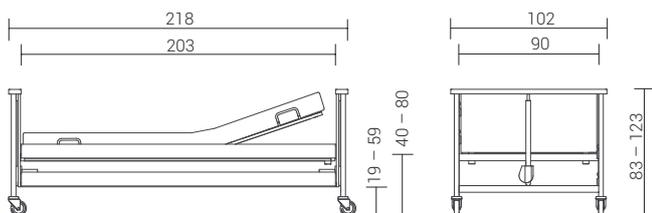

Todos os motores podem ser removidos sem recurso a ferramentas. A proteção amovível do motor protege-o de eventuais danos.



ref. 276349

Características diferenciadoras:





Prevenção de quedas e trabalho a uma altura ergonómica

Dali low-econ

Versão Arminia

A cama de altura reduzida e económica

▲ A cama baixa Dali low-econ combina utilidade com versatilidade devido à sua construção robusta.

A nossa cama Dali low-econ combina muitos pontos fortes com uma boa relação preço-qualidade. Com uma amplitude de ajuste de altura de 32 a 72 cm a sua posição inferior mínima protege os utentes da queda e sequentes possíveis lesões. Simultaneamente, pessoas mais altas podem auxiliar o utente acamado numa posição que poupa as costas. Como em todas as versões económicas dos modelos Dali (consulte a próxima secção), esta cama também é controlada por um acionamento seguro e eficaz de 230 volts. O comando com fios possui uma função de bloqueio seletivo que pode ser facilmente operacionalizado. A cabeceira e os peseiros da cama são revestidos com uns elegantes painéis em madeira. Este visual agradável e neutro, combina perfeitamente a cama Dali low-econ com o internacional e bem sucedido modelo baixo Arminia Low da série precedente.

Grandes Vantagens

- Carga de trabalho segura de 185 kg
- Trendelenburg invertido e posição sentado
- Pedal suave de travão
- Pendural incluído de série
- Cremalheira incluída de série



▲ O comando seletivo está ligado à cama com cabo.




▲ O motor robusto de 230 volts controla a cama de forma segura e silenciosa.



▲ O estrado de 4 secções com ripas em madeira flexíveis promove um grande conforto. A posição «sentado» vem incluída de série.

Dimensões exteriores/Intervalo de ajuste em altura:

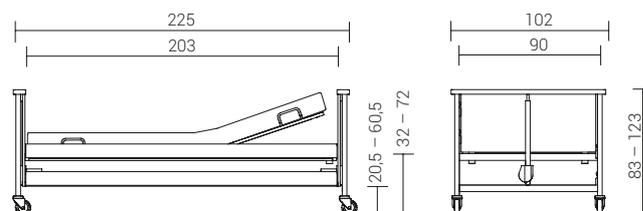

ref. 300949

Características diferenciadoras:





Dali Econ

Rápida e tradicional

O Dali é a cama de cuidados mais vendida da Alemanha, graças à sua inovadora tecnologia e longevidade. É uma cama robusta e de baixa manutenção feita com materiais de alta qualidade.

O estrado de 4 secções pode ser operado convenientemente por um tradicional comando com fios.

Graças ao recurso Trendelenburg invertido incluído de série, a cama pode ser ajustada para uma posição sentada ideal para comer ou ver televisão.

Se o cuidador quiser bloquear certas posições ao utente, pode ser feito usando o comando com fios.

A guarda lateral desliza facilmente na calha pré-montada através de suportes com o sistema Easy Click. Isto ajuda a montar a cama de forma significativamente mais rápida e simples.

Grandes vantagens

- Carga de trabalho segura até 185 kg
- Travão de pé suave que pode ser operado com pantufas ou de meias
- Comando com fios fiável e duradouro
- Montagem fácil e rápida através do sistema Easy Click
- O ajuste do apoio para as pernas está disponível com cremalheira. A cremalheira está disponível como acessório (custo adicional).
- Pendural incluído de série



▲ O comando com fios, permite controlar a cama sem esforço tanto pelo utente quanto pelo cuidador.


▲ A posição sentado, torna-se confortável e facilita a respiração, reduzindo o risco de aspiração pulmonar durante as refeições.

▼ Os travões podem ser operados facilmente com meias ou pantufas.

▼ As guardas laterais de segurança podem ser colocadas ou removidas com sistema Easy Click, sem recurso a ferramentas.



Dimensões exteriores/Intervalo de ajuste em altura:

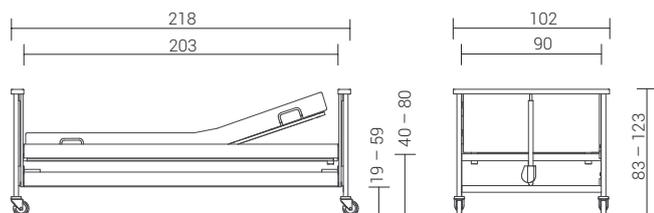

ref. 300946

Características diferenciadoras:



Para os modelos:
Dali Low-Econ
Dali Econ

Sistema Elétrico 230volts



▲ A cama Dali Low-Econ, de altura reduzida a um preço acessível



▲ A cama Dali Low-Econ para prevenção de lesões em caso de queda.



▲ O sistema econ drive é compatível com a maioria das ligações elétricas internacionais.

As camas Dali Low-Econ e Econ vêm de série com sistema elétrico de 230 volts, o que compatibiliza a ligação da cama com a maioria dos sistemas elétricos internacionais.

O modelo Dali low-econ (consulte a página 6) não existe em versão de 24 volts.

Todas as camas económicas têm um acionamento seguro, fiável e de baixo consumo energético de 230 volts. Com uma variedade de tomadas elétricas à sua escolha, estas camas estão prontas para uso internacional em qualquer local que sejam necessárias. Os comandos dos modelos Econ são ligados à cama via cabo, de acordo com o já mencionado. Todas as funções de ajuste podem ser bloqueadas ou desbloqueadas de maneira conveniente e seletiva através do comando e respetiva chave incluída. A app Dali-Lock não é compatível com as camas económicas (Econ e Low-Econ).




▲ O comando dos modelos Econ pode ser encaixado nas guardas da cama para conveniência.



- ◀ O transformador de tensão SwitchMode produz uma proteção de baixa tensão de 24 volts diretamente na tomada.

VIVER DESCANSADO EM CASA

Poupança de Energia

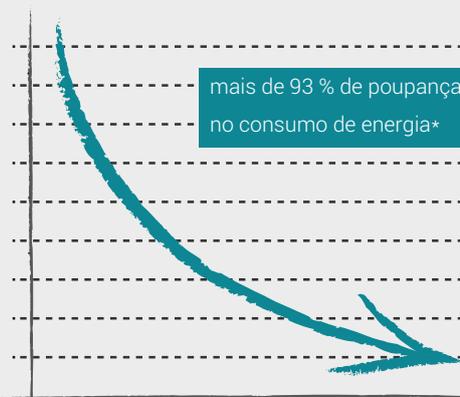

* comparado com os sistemas de 230 volts com uma média de 5 ajustes diários

Sistema de 24 volts

A ligação elétrica de 24 volts da Burmeier fornece um padrão de segurança ideal para cuidar de pessoas em casa. Todos os componentes de 230 volts estão montados de forma segura para que o utente não esteja exposto diretamente a possíveis riscos. Através do SwitchMode, a corrente que é injetada na cama a uma potência reduzida, proporciona um baixo consumo energético. Isso significa que os utentes usufruem de um nível muito alto de segurança.

A cama não possui componentes que transportam corrente elétrica, exceto quando da utilização do comando. Com o Sistema de 24 volts, o consumo de energia baixa até 93%. Além disso, são economizados mais custos e esforços pelo facto de que as medições de corrente de descarga, certificadas pela TÜV Rheinland, deixam de ser necessárias.


Nas camas Dali que estão em frequente utilização, as medições de corrente de descarga necessárias devem ser realizadas a cada 2 anos.

O uso do sistema de 24 volts prolonga esse intervalo a tal ponto que as medições não são necessárias dentro da vida útil prevista da cama. A vida útil aplicável é fornecida nas instruções de operação.

Não são necessárias medições de corrente de descarga ao utilizar a cama pela primeira vez, por se tratar de um processo já realizado em fábrica. Também não é necessário um técnico especializado na montagem da cama (economiza custos adicionais ao cliente/utente).

VIVER SEGURO EM CASA

Grandes Vantagens

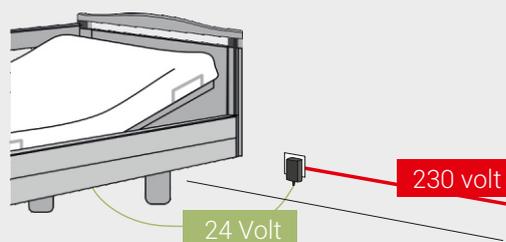

- Baixa tensão de proteção do transformador ligado à tomada
- Sem componentes elétricos de 230 volts na cama
- Sem necessidade de medição de corrente ou descarga após montagem e até mesmo durante a vida útil da cama
- Certificado de testes disponível para download para todas as camas.



O sistema Easy Click

▲ As guardas laterais de segurança podem ser colocadas ou removidas em segundos usando o sistema Easy Click.

As guardas laterais de segurança da série Dali são de fácil operacionalização e oferecem uma excelente proteção. Até a montagem em si, tornou-se muito mais simples. Com o sistema Easy Click, as 4 guardas podem ser instaladas ou removidas em poucos segundos. Simultaneamente são tão seguras e fortemente encaixadas, que até mesmo os utentes mais agitados não as conseguem desencaixar de forma acidental.


Os encaixes já vêm pré-montados nas cabeceiras e peseiros em todas as camas Dali. As guardas laterais de segurança apenas necessitam ser encaixadas firmemente no respetivo encaixe. Ao pretender removê-las existe uma pequena peça de controlo que ao deslizar, liberta a guarda. As guardas são encaixadas de tal forma que é impossível ao utente removê-las acidentalmente. As extremidades das barras estão protegidas por uma elegante capa plástica de cor antracite.

O sistema Easy Click torna a montagem das camas significativamente simples para os clientes/utentes/cuidadores e poupa imenso tempo neste processo. Os cuidadores podem remover facilmente as guardas quando estas não sejam mais necessárias.





- ▲ As guardas laterais de segurança promovem uma proteção ideal

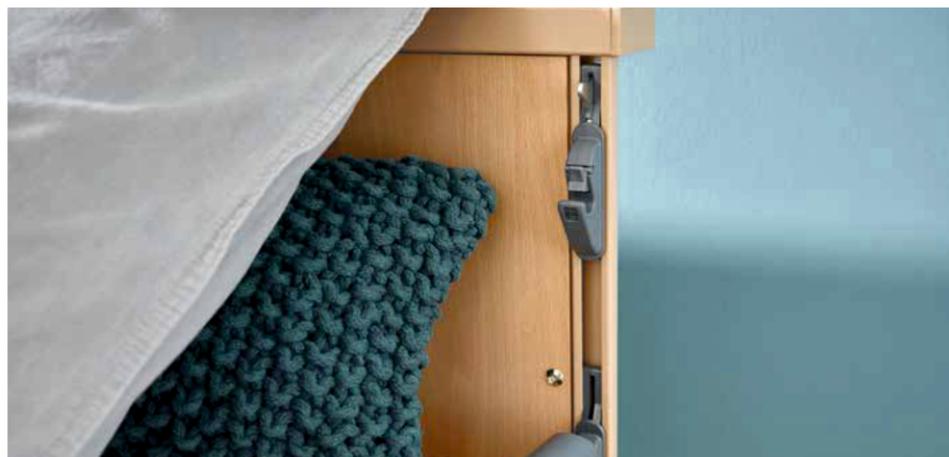

- ▲ O mecanismo de encaixe para as guardas laterais de segurança já vem pré-montado. Poupa assim muito tempo durante a montagem e os suportes ficam imperceptíveis quando a cama está na posição mais baixa

Fácil de Montar



- ▲ Aquando na posição diagonal, as guardas laterais oferecem uma boa orientação espacial ao utente



O comando bluetooth (sem fios)

▲ O comando wireless pode ser utilizado intuitivamente

Uma cama ajustável eletronicamente com comando oferece um conforto total. No entanto, o tradicional comando ligado à cama por um cabo, tem as suas desvantagens. O cabo potencia eventuais quedas, acumula pó e é por vezes danificado em embates. Desenhamos então o novo comando sem fios para o modelo Dali standard de 24 volts que se conecta por Bluetooth.

Tanto os utentes quanto os cuidadores, ganham um conforto na operação por terem o controlo sempre à mão, onde o necessitem. O comando tem ainda um lugar nas guardas laterais de segurança para que esteja sempre acessível.

O ciclo de vida é bastante prolongado utilizando pilhas de iões de lítio. O comando está munido de um indicador que informa a necessidade de mudar de pilhas através de um led intermitente.

A tampa traseira do comando permite a troca de pilhas sem ter de recorrer a qualquer ferramenta.

Como é suposto, o cuidador pode utilizar o comando para seletivamente desbloquear funções de ajuste individualmente permitidas ao utente. Para o efeito, a chave magnética (incluída) deve ser aproximada ao painel do comando e o utilizador deve pressionar o botão para bloquear a respetiva função. Torna-se ainda mais fácil e conveniente utilizar a Dali-Lock app para estas operações.



Assim que a pilha necessite ▶ ser substituída, surgirá um sinal luminoso no comando.



▼ As pilhas podem ser substituídas em poucos segundos



▲ As posições de ajuste da cama podem ser bloqueadas ou desbloqueadas intuitivamente recorrendo à chave magnética.


VIVER EM CASA EM SEGURANÇA

Operações wireless

- Operação simplificada, tanto na cama como fora dela, sem cabos para não limitar a distância
- Pictogramas com contraste de cores, fáceis de interpretar, tornam a operação simplificada.
- O comando pode ser posicionado livremente nas guardas laterais.
- As pilhas duram pelos menos 2 anos, com base numa utilização média de 140 segundos diários.

O comando pode ser pendurado ▶ nas guardas de segurança laterais, tornando-o acessível a qualquer momento.



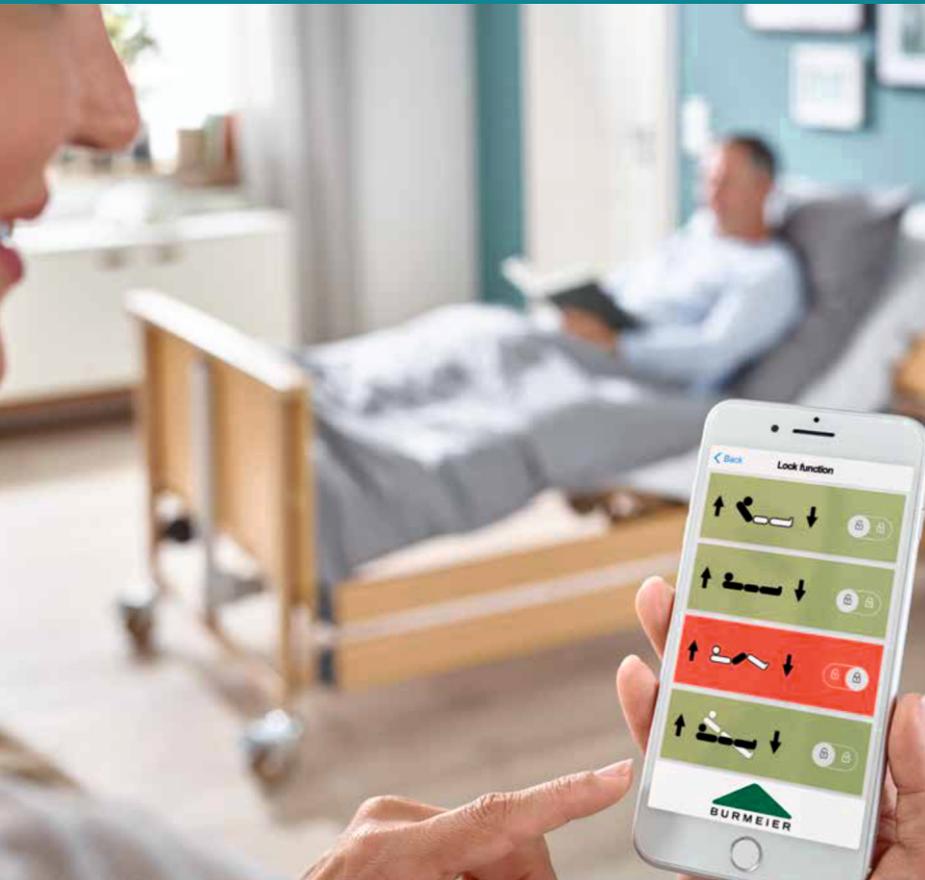

A sua cama Dali ►
é detetada pela
app e conecta-se
à mesma.



A app Dali-Lock

Design de segurança digital

As nossas camas Dali são práticas e flexíveis com várias posições de ajuste do estrado que permitem. Por vezes, algumas posições não são recomendadas devido ao estado do utente. Por exemplo: se o cuidador pretende bloquear a função Trendelenburg invertido ou para baixar o encosto, a nossa Dali-Lock app pode ajudar. Esta app funciona em smartphones Android ou Apple e pode ser descarregado nas respetivas app stores gratuitamente. Este funciona com todos os modelos Dali com sistema de 24 volts.

A app Dali Lock deteta a cama automaticamente e conecta-se ao procurar o código na parte de trás do comando. Pode agora, seletivamente bloquear ou desbloquear todas as funções individualmente utilizando pictogramas simples.


A app Dali-Lock faz parte de um sistema de rede digital inteligente da Burmeier. Visite o website www.burmeier.com para saber sempre as novidades sobre outras apps e conhecer mais sobre este moderno configurador de camas.



VIVER EM CASA EM SEGURANÇA

A app Dali-Lock

- Descarregue a app Dali-Lock gratuitamente para o seu smartphone Android ou Apple.
- Inicie a procura da cama. A app encontra a sua cama Dali.
- Emparelhe o seu smartphone com a app scanando o código na parte de trás do comando.
- Pode agora, seletivamente, bloquear ou desbloquear as posições do estrado, assim como os ajustes de peso individualmente.

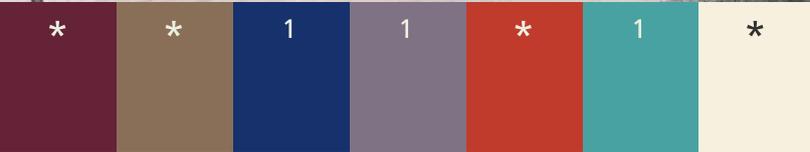

Capas em tecido



As capas em tecido feitas com materiais de alta qualidade, podem ser facilmente lavadas na máquina de lavar roupa em casa. São amigos do ambiente em concordância com Oko-Tex Standard 100.

Poderá também encontrar o seu estilo de capa utilizando o configurador de capas em tecido (Softcover configurators) no website do fabricante.

Sentimo-nos imediatamente muito mais confortáveis numa cama embelezada que se enquadre com o design do quarto. As nossas capas em tecido transformam a série Dali numa série de camas elegantes. As **capas em tecido** são estilizadas num tecido facilmente ajustável à cabeceira e peseiro da cama e podem também forrar as guardas laterais de segurança. Escolha a partir de **7 cores atrativas**: petróleo, azul escuro, baunilha, lavanda, bordeaux, laranja e castanho, indicando a cor aquando da encomenda.

Legenda:

1 - Cor sob encomenda e com entrega em 90 dias

* - Cor em stock

2 - Conjunto= 1 Cabeceiro + 1 Peseiro + 2 Guardas Laterais



ref. 259579

Elegância
confortável ao
"Estilo Arminia"



As cabeceiras e peseiros das camas Dali Econ ► podem ser revestidos com os painéis de madeira para cabeceira/peseiros. Com os painéis a estética da cama sofre fortes melhoramentos visto ocultar o motor e os cabos que estão na cabeceira/peseiros. Agora, naturalmente, os utilizadores da nova série Dali poderão apreciar o estilo «Arminia»

Acessórios práticos



▲ Painel cabeceira/peseiro para cama Dali Econ ou Standard
ref. 731732



▲ Painel cabeceira/peseiro para cama Dali Low-Econ
ref. 731952

Até as versões standard das camas Dali oferecem conforto e conveniência. No entanto, utilizando os acessórios originais Burmeier, o conforto, proteção, mobilidade e estilo das camas podem ser consideravelmente potenciadas. Os utilizadores das camas podem adquirir acessórios para tornar o dia ainda mais agradável. A instalação simples e expedição direta tornam os acessórios num companheiro ideal.



▲ A cremalheira opcional permite o ajuste manual do apoio de perna

ref. 197091



▲ As guardas laterais com corrimão aumentam a altura de segurança em 18cm (o corrimão é adquirido como acessório).

ref. 191367



▲ A lateral de segurança em metal é particularmente robusta e fácil de limpar. Medidas: 148x40cm
Ancoragem: 28x85mm

ref. AD-952/E



- ▲ Proteção em espuma de alta densidade para guardas laterais ref. AD-200



- ▲ O comando sem fios compatível com a Dali Standard (Versão Arminia) permite o controlo da cama por Bluetooth. ref. 263241



- ▲ Chave magnética para comando Bluetooth ref. 270765



- ▲ O comando com fios (compatível com a Dali Low-Econ e Econ) operacionaliza a cama nas suas diversas posições. ref. 270829



- ▲ O tabuleiro de refeições pode ser facilmente encaixado nas guardas laterais de segurança ref. 26700

Colchões Anti-Escaras

CAMA
+
COLCHÃO
-4%



Colchão Visco Elástico Articulado de Alto Risco c/ forra Flexsilk U.S.



Este colchão é ideal para doentes acamados de longa duração.

A base do colchão é composta por Plumex, uma espuma de alta resiliência que suporta o peso exercido sobre o colchão proporcionando, assim, efeito flutuante. Possui ainda formas para possibilitar a articulação do mesmo.

A superfície é composta por Viscoflex, espuma que tem como principal característica a total adaptação à forma do corpo que se traduz em descanso com máximo conforto.

Conjugando uma base de suporte em espuma de alta resiliência Plumex@D30 com uma superfície em espuma de memória Viscoflex@D50, este colchão associa ao conforto, um importante efeito alívio de pressão mediante a redistribuição do peso que resulta do comportamento da espuma viscoelástica. O colchão apresenta a capa Flexsilk US (costurada por ultrasons).

Espessura da base (espuma HR Plumex D30): 10cm

Espessura da Superfície (espuma Viscoflex D50): 5cm


3 anos de garantia

ref. 3-MA1009

ref. 3-MA1019



Colchão Visco Elástico Articulado de Médio Risco c/ forra Flexsilk ECO

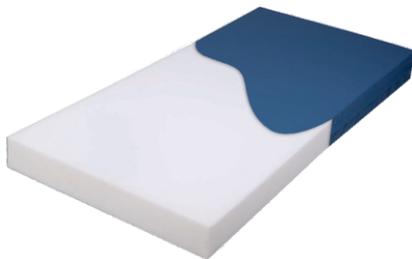

Este modelo, ideal para acamados de média duração, otimiza o binómio preço/qualidade e traduz uma solução de base na prevenção do desenvolvimento de úlceras de pressão em pacientes que constituem grupo de risco.

Conjugando uma base de suporte em espuma Poliéter D28 com uma superfície em espuma de memória Visco D50, este colchão associa ao conforto, um importante efeito alívio de pressão mediante a redistribuição do peso que resulta do comportamento da espuma viscoelástica.

O colchão apresenta a capa Flexsilk ECO (costurada por pontos).

Espessura da base (espuma Poliéter D28): 8cm

Espessura da Superfície (espuma visco D50): 4cm

3 anos de garantia

ref. 3-HOMR0011



Colchão Visco Elástico Articulado de Médio Risco c/ forra Flexsilk ECO



Este modelo, ideal para acamados de média duração, otimiza o binómio preço/qualidade e traduz uma solução de base na prevenção do desenvolvimento de úlceras de pressão em pacientes que constituem grupo de risco.

Conjugando uma base de suporte em espuma Poliéter D28 com uma superfície em espuma de memória Visco D50, este colchão associa ao conforto, um importante efeito alívio de pressão mediante a redistribuição do peso que resulta do comportamento da espuma viscoelástica.

O colchão apresenta a capa Flexsilk ECO (costurada por pontos).

Espessura da base (espuma poliéter D28): 10cm


Espessura da Superfície (espuma visco D50): 4cm

3 anos de garantia

Medida: 195x88x14cm



Colchão Visco Elástico Articulado de Médio Risco Alova

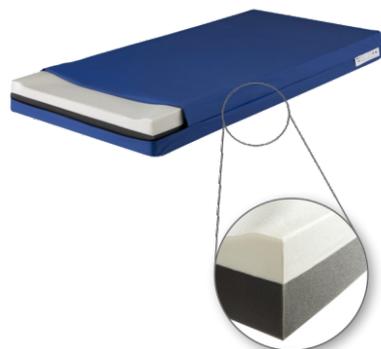

Funcionalidade: Diminuição da pressão por densidades adaptando-se a cada zona do corpo

Eficácia: Ajuda no tratamento de escaras de nível 1 e 2. Melhoria do fluxo vascular ao nível do calcanhar por inclinação integrada na área dos pés

Segurança: Minimização do risco anti-higiene por proteção tecnicamente comprovada integral

Conforto: Acompanhamento dos movimentos do corpo

Ergonómico: Leve, fácil de transportar (asa para transporte)

Ecológico: Aumenta a capacidade de transporte no veículo.

Espessura da base (Espuma HR Viscoflex): 8cm

Espessura da Superfície (espuma viscoelástica D75): 6cm

3 anos de garantia (para uso profissional, 1 ano de garantia)

ref. VMA62RC-HIP

Equipamento e opções

Modelo	Dali Standard	Dali low-econ	Dali econ	
Estrado	90 × 200 cm, 4 secções	90 × 200 cm, 4 secções	90 × 200 cm, 4 secções	
Dimensões exteriores	102 × 218 cm	102 × 225 cm	102 × 218 cm	
Ajuste em altura	40 – 80 cm	32-72 cm	40-80 cm	
Carga segura de trabalho	185 kg	185 kg	185 kg	
Posição de Trendelenburg inverso	12°	12°	12°	
Decoração da madeira	Faia Natural	Faia Natural	Faia Natural	
Cor do rebordo	Topázio	Topázio	Topázio	
Comando sem fios com função seletiva de bloqueio		-	-	
Comando com fios com função seletiva de bloqueio	-			
Apta para app Dali-Lock		-	-	
Lavagem em máquina	-	-	-	
Estrado de ripas de madeira				
Sistema de motor Linak 24 volts		-	-	
Sistema de motor de 230 volts	0			
Molduras em madeira para cabeceiros e peseiros			0	
Pendural				
Guardas laterais de segurança em madeira				
Corrimão para guardas laterais de segurança	0	0	0	
Sistema mecânico de libertação do encosto				
Tabuleiro	0	0	0	
Capas em tecido para cabeceiras e peseiros	0	0	0	
Capas em tecido para guardas laterais	0	0	0	
Cremalheira/Rastomat			0	
Guardas metálicas de 1,48m	0	0	0	

= Equipamento Standard

0 = Opcional

- = não disponível

Características dos colchões

Modelo	3-MA1009	3-MA1019	3-HOMR0011	3-HOMR0003	3-HOMR0004	VMA62RC-HIP
Medidas	190x90x15cm	195x90x15cm	195x88x12cm	185x88x14cm	195x88x14cm	195x88x14cm
Material Base	Eter Plumex D30	Eter Plumex D30	Poliéter 28kg/m ³	Poliéter 28kg/m ³	Poliéter 28kg/m ³	Poliéter 18kg/m ³
Material Superfície	Viscoflex D50	Viscoflex D50	Visco D50	Visco D50	Visco D50	Visco D80
Espessura Base	100mm	100mm	80mm	100mm	100mm	80mm
Espessura Superfície	50mm	50mm	40mm	40mm	40mm	60mm
Superfície Ignífuga	NE	NE	ISO 3795	ISO 3795	ISO 3795	EN 597
Forra	Flexsilk US	Flexsilk US	Flexsilk ECO	Flexsilk ECO	Flexsilk ECO	Promust PU
Cor Forra	Verde	Verde	Azul	Azul	Azul	Azul
Norma Ignífuga da Forra	CRIB 5	CRIB 5	CRIB 5	CRIB 5	CRIB 5	GPDM DI 90 D
Costura	Ultrasons	Ultrasons	Pontos	Pontos	Pontos	Pontos
Peso	16kg	16kg	15kg	15kg	15kg	14kg
Peso Máximo do Utilizador	125kg	125kg	125kg	125kg	125kg	120kg

NE - Não especificado

Apoio ao Cliente
808 207 707



Centro Ortopédico do Sul

Download de
Versão Digital



Zona Empresarial de Marim, Lote 7
8700-230 Olhão
Faro - Portugal
Telm. +351 968 930 522
Tel. +351 289 702 869
Fax +351 289 702 435

Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que o Centro Ortopédico do Sul reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.